

Orthèse de grand appareillage de posture suropédieuse

Auteurs : B. REQUIER¹, M. KERZONCUF¹, G. DE BRIER¹, M. JAOUEN¹, C. AMIOT¹, M. TESTUD¹, J.L. CONIL², D. PELLATON³, M. DELARQUE⁴, G. LOTITO¹, L. BENSOUSSAN¹, J.M. VITON¹, A. DELARQUE¹

1. Pôle de Médecine Physique et de Réadaptation. CHU Timone, Marseille.
2. Société Lagarrigue, Aubagne
3. Société Bertrand Tourret Couderc Orthopédie, Marseille
4. Revendeur de matériel médical, Marseille

Sommaire


- [1 MEMBRE INFERIEUR ET AIDE A LA DEAMBULATION / Orthèse de grand appareillage de posture suropédieuse](#)
- [2 Autres appellations](#)
- [3 Objectifs](#)
- [4 Indications](#)
- [5 Précautions d'emploi](#)
 - [5.1 Limites et contre-indications](#)
 - [5.2 Suivi et surveillance](#)
 - [5.3 Durée d'utilisation](#)
- [6 Principes mécaniques et description](#)
 - [6.1 Biomécanique](#)
 - [6.2 Réalisation](#)
 - [6.3 Matériaux](#)
- [7 Modalités de prescription](#)
- [8 Aller plus loin](#)

MEMBRE INFERIEUR ET AIDE A LA DEAMBULATION / Orthèse de grand appareillage de posture suropédieuse

Autres appellations

Synonymes : orthèse de correction, orthèse de repos, orthèse de position.

Objectifs

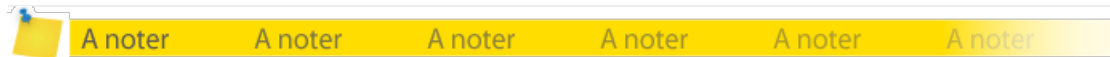

- rôle préventif prépondérant dans le travail de posture
- prévention et/ou correction :
 - des déviations segmentaire
 - des raideurs articulaires
 - des rétractions tendineuses
- conserver un gain d'amplitude articulaire obtenu en chirurgie, par de la kinésithérapie
- correction d'une malposition/prévention des déformations
- antalgique
- cas particulier des brûlés : prévenir ou limiter la rétraction cutanée et ses conséquences en posture de capacité cutanée maximale et pressothérapie.

Indications

Lutte contre l'équin par orthèse suropédieuse avec action principale ciblée sur le soléaire.

Précautions d'emploi

Limites et contre-indications



- orthopédiques : équin fixé
- troubles trophiques pré-existant
- déficit sensitif (risque de lésion cutanée)-hyperesthésie-allodynie
- oedèmes des membres inférieurs (variations de volume)
- artériopathie des membres inférieurs (risque de troubles trophiques)
- aspect esthétique

Suivi et surveillance

Tolérance et effets indésirables :

- **cutanée :**
 - troubles trophiques

- éducation du patient et de l'entourage à la recherche quotidienne de trouble trophique. Inspection par le médecin prescripteur à chaque consultation
- **neuro-vasculaire :**
 - surveillance pouls, sensibilité, motricité, cyanose, extrémités froides, temps de recoloration cutanée
 - risque de compression des nerfs sous cutanés et vaisseaux si orthèse trop serrée
 - recherche de thrombose veineuse profonde
 - épine irritative
- douleur (musculotendineuse), tensions musculaires
- évaluation de l'état de l'orthèse.

Efficacité :

- observance (temps de port, conditions de port)
- pas d'intérêt à poursuivre un appareillage parfois contraignant si non réponse aux objectifs des soignants et aux doléances du patient. Penser à modifier, voire remplacer, l'appareillage, et / ou envisager d'autres thérapeutiques.

Durée d'utilisation

- temps de port limité
- pas de validation de protocole de durée de traitements précis. Il dépend essentiellement de l'évolution clinique du patient selon l'indication et les objectifs préalablement définis entre le thérapeute et le patient tout en respectant les contre-indications et précautions d'emploi. Par exemple, l'utilisation peut se faire par séance courte de 30 minutes trois à quatre fois par jour selon les indications, contre-indications et tolérance de l'appareillage en respectant un temps de repos adapté.

Principes mécaniques et description

Biomécanique

- correction : corriger de façon progressive en appliquant une contrainte passive, active ou activo-passive afin de mettre en tension les structures tendineuses, capsulaires, articulaires, ligamentaires, sous-cutanées et cutanées selon les objectifs de l'appareillage
- travail de posture statique ou dynamique
- une seule articulation, mono-axiale, centrée sur la cheville.

Réalisation

- sur mesure à partir d'un modèle plâtre ou numérique (CFAO, laser)
- par un orthoprothésiste
- en flexion (lutte contre l'équin).

Matériaux

- polyoléfines (polyéthylène, polypropylène)
- articulations métalliques de cheville selon l'indication : 3 types :
 - en secteur : crémaillère (STEPLOCK) : moins précis mais plus solide
 - lisse à cran (MONODOS) : précise mais fragile
 - libre avec tenseur : rappel élastique : possible uniquement sur suropédieuse en flexion dorsale
- fermeture par des bandes autoagrippantes.

Modalités de prescription

- ordonnance de grand appareillage
- demande d'entente préalable + prescription médicale détaillée (S3125 ou normale) initiale par MPR ou autre spécialité autorisée
- renouvellement possible par tout médecin
- remboursement à 100%
- inscrit ou non à la LPPR
- agrément du fournisseur.



[fig1 7.1_Orthèse_de_posture_suropédieuse - Copie.jpg](#)

[fig2 7.1_Orthèse_de_posture_suropédieuse - Copie.jpg](#)

articulation type monodos sur orthèse suropédieuse

Aller plus loin



Aller plus loin

Aller plus loin

Aller plus loin

Aller plus loin

Aller plus loin

Paysant J, Martinet N, Ferry MF, André JM, Appareillage orthétique temporaire des membres - Encyclopédie médico-chirurgicale - kinésithérapie-médecine physique-réadaptation 26-160-A-10

André J, Paysant J, Chellig L, L'appareillage en neurologie- lettres neurologie 1998 ; 2 : 231-237

Calmels P, Abeillon G, L'appareillage orthopédique en pratique quotidienne. Concours médical 1994 ; 116 : 1713-1718

Braddom RL, Physical Medicine and Rehabilitation. édition Saunders Elsevier. Third edition 2007.

Held JP, Dizien O, Traité de médecine physique et de réadaptation. édition Flammarion, 1998.